

# ScopePad500

お手持ちの顕微鏡が  
マルチメディア顕微鏡に!!

Power Switch

SIM Card Slot (Optional)

TF Card Slot

HDMI

Reset

Mini USB

Headphone Slot

Power

## アンドロイドパッドを使って 可能になった多機能性

- HDMIでプロジェクターなどにも接続可能
- マイクロUSBでマウスに接続, USBメモリに接続
- Androidアプリがインストールできます
- Bluetooth, ワイヤレスネットワークで接続可能
- Googleの Picasaに画像が簡単に保存できます


## 大型タッチパネルスクリーン ディスカッションもスムーズ!!

- 大きな画面で情報を共有, HDMIで大画面出力
- 無線マウスで クリーンベンチ内で使ったり, 離れた場所から使えます



## 露出コントラスト設定

アプリケーションに応じ感度を上げる事ができます。

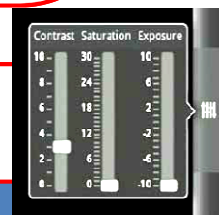

## 500万画素・ リアルタイム追従

- 高精彩 500万画素カメラ内蔵
- 30フレーム/秒でストレスなく操作できます

CCD  
(ケーブル接続)

Cマウント規格  
接続口

Cマウント  
アダプター

## 動画撮影も できます

## 鏡像にも 対応

## Cマウント規格で顕微鏡に接続

- Cマウントアダプターで顕微鏡に接続します。
- Cマウント対応の三眼のある顕微鏡に接続し, 既存の顕微鏡で複数のユーザーで画像を簡単にシェアできます。
- モニター一体型顕微鏡と違い既存の顕微鏡に接続でき, またあらゆる三眼の顕微鏡に対応します。\*
- ScopePadは簡単に取り外せ複数の顕微鏡で使用することもできます。
- 見やすい角度にScopePadの向きを固定することができます。



## ■ 各種顕微鏡接続例



# 測定アプリ標準装備 その場でタッチで記録が残せます。



- 長さ、楕円、多角形の面積と周囲長、角度などの測定
- レタリングが簡単にでき、記録が画像、Excelで残せます
- 文字を書いたり矢印をつけたりコントラスト調整することができます
- その場で 番号をつけることができます。

モデル	XC-500
商品名	ScopePad-500
画素数	500万画素
OS	Android 2.3
ディスプレイ	9.7"スクリーン
受光部	1/2 インチ
チップサイズ	2.2x2.2μm
Refresh rate	30フレーム/秒
ビデオレート	15fps(720P)
CPU	1.2GHz
RAM	1G (DDR3) 8GB内部RAM
画像形式	JPEG保存
ビデオ形式	MP4 (保存)
測定アプリ	長さ、面積測定 カウント機能
保証期間	2年間
価格	¥200,000



## ScopeCamera-500 モニターにHDMIで接続します。



- ◆500万画素1/2.5" (4:3) CMOSカメラ
- ◆Cマウントで接続します。
- ◆フォト、ビデオ、アルバム表示、Replayモードで選択。
- ◆HDMIもしくはDVIでモニターに直接出力(ケーブル付属)PC要らず
- ◆ビデオ出力:  
1080P/20fps High Definition Format(1920x1080);  
720P/30fps High Definition Format(1280x720)
- ◆リアルタイム画像
- ◆TF Cardカード標準装備
- ◆自動ホワイトバランスボタン
- ◆USB出力

型番 SC-500  
¥95,000

## 0.5x Cマウント アダプター

定価  
25,000円



Olympus exfocus x0.5  
Cat# exO-05

nikon exfocus x0.5  
Cat# exN-05

Leica exfocus x0.5  
Cat# exL-05

zeiss exfocus x0.5  
Cat# exZ-05

Φ23mm 30mm 30.5mmの  
鏡筒に対応



接眼 アダプター  
Cat#: EP-05